



GUIA PRÁTICO HYDROFILM® HARTMANN

Proteção transparente para feridas,
curativos e dispositivos





O Hydrofilm®, da Hartmann, é um filme transparente, estéril e autoadesivo de poliuretano, desenvolvido para proteger feridas e auxiliar na retenção de curativos primários e na fixação de dispositivos médicos.

Sua transparência permite a visualização da área coberta, enquanto sua permeabilidade ao vapor de umidade e aos gases contribui para manter condições adequadas sob o filme.

Além disso, o Hydrofilm® atua como barreira contra água e contaminação externa.



POR QUE USAR O HYDROFILM®?

Quando a cobertura precisa proteger sem impedir a visualização do local, este filme transparente pode oferecer vantagens importantes.

Proteção

Forma uma barreira contra água e contaminação externa.

Transparência

Permite visualizar a área coberta sem a necessidade de remover o filme.

Permeabilidade

Permite a passagem de vapor de umidade e gases.

Fixação

Pode ser utilizado para retenção de curativos primários e fixação de cateteres e cânulas, conforme indicação.

Remoção atraumática

Pode ser removido pelo alongamento do material, favorecendo uma retirada mais confortável.



Quando utilizar o Hydrofilm®?

O Hydrofilm® pode ser utilizado em diferentes situações nas quais seja necessária uma cobertura transparente, estéril e autoadesiva.

Proteção de feridas

- Feridas pós-operatórias
- Feridas secas ou pouco exsudativas
- Abrasões
- Queimaduras de primeiro grau
- Áreas após dermoabrasão
- Enxertos de pele

Proteção de curativos

Pode ser utilizado sobre curativos primários e materiais absorventes, contribuindo para protegê-los contra água e contaminação externa.

Fixação de dispositivos

Pode auxiliar na fixação de dispositivos médicos, como cateteres e cânulas, quando a transparência e a proteção da área são importantes.



IMPORTANTE

O Hydrofilm® não é indicado para feridas infectadas, com exsudato abundante ou sangramento ativo. A indicação deve sempre considerar as condições da ferida e as instruções de uso do produto.

COMO APLICAR O HYDROFILM®?

Uma aplicação adequada começa antes mesmo de retirar o filme da embalagem.

01 | Prepare

Certifique-se de que a pele ao redor da área de aplicação esteja limpa e completamente seca.

02 | Posicione

Abra o envelope e retire o Hydrofilm®. Remova parcialmente as películas protetoras 1 e 2.

03 | Aplique

Posicione o lado adesivo do Hydrofilm® sobre a área desejada e remova completamente as películas 1 e 2.

04 | Fixe


Remova as películas protetoras 3 e 4, uma de cada vez, enquanto pressiona suavemente o filme contra a pele.

05 | Confira

Verifique se o Hydrofilm® está bem aderido à pele e corretamente posicionado sobre a área a ser protegida.



Para um guia visual,
acesse o QR Code:

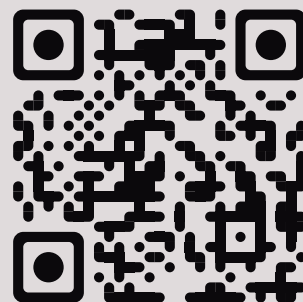



Como remover sem puxar a pele?

A técnica de remoção faz diferença.
Solte uma das extremidades e alongue o filme
enquanto o remove.

O Hydrofilm® pode ser retirado por meio do
alongamento do material, em vez de
simplesmente puxá-lo para cima. Essa técnica
favorece uma remoção mais confortável e
pode reduzir o trauma mecânico sobre a pele.



LEMBRE-SE:

PARA APLICAR, **PRESSIONE.**
PARA REMOVER, **ESTIQUE.**



Hydrofilm® na fixação de dispositivos

Na fixação de cateteres e cânulas, a cobertura precisa contribuir para a estabilidade do dispositivo e, ao mesmo tempo, permitir a inspeção do local. O Hydrofilm® combina características que podem ser relevantes nesse contexto

Transparência

Facilita a visualização da área coberta.

Proteção

Forma uma barreira contra água e contaminação externa.

Adesão

Permite a retenção do dispositivo quando utilizado conforme sua indicação.

Permeabilidade

Permite a passagem de vapor de umidade e gases.

A utilização deve sempre seguir a indicação específica do produto e o protocolo institucional aplicável ao dispositivo.





QUANDO PENSAR NO HYDROFILM®?

PROTEGER

Feridas, curativos e áreas de aplicação contra água e contaminação externa.

VISUALIZAR

A área coberta sem precisar remover o filme.

FIXAR

Curativos primários, cateteres e cânulas, conforme indicação.

Cuidar também é encontrar soluções que facilitem decisões e preservem o que precisa ser acompanhado. E quando a proteção da área, a visualização do local e a segurança da fixação precisam caminhar juntas, contar com uma cobertura transparente pode fazer diferença na assistência.

O Hydrofilm® foi desenvolvido para oferecer essa combinação em diferentes situações de cuidado.



Acesse nosso catálogo completo e descubra como essa solução pode contribuir para a sua prática.

Referências:

- 1 - Disponível em: Application of Hydrofilm®
- 2 - Disponível em: Hydrofilm | Hartmann - Veris Saúde
- 3 - Disponível em: Hydrofilm | Tratamento de Feridas | Hartmann

